

fest. Entfernen Sie abschliessend die blaue Deckfolie vom Wirkstoffpunkt.



## Dornwarzen-Pflaster intensiv

### Medizinprodukt

**Selbstklebende Wirkstoffpunkte mit Salicyl- und Milchsäure und Druckschutzpflaster zur Schmerzlinderung und örtlichen Behandlung von Dornwarzen.**

Durch das Tag-und-Nacht-Konzept wird die Dornwarze wirksam entfernt und die umliegende Haut geschützt. Die Wirkstoffpunkte entfernen durch die hautschälende Wirkung von Salicyl- und Milchsäure die Dornwarze effektiv und gezielt. Die Druckschutzpflaster lindern den Druckschmerz, schützen vor Infektionsausbreitung und bieten sicheren Halt.


#### Anwendung:

Die Behandlung erfolgt in 2 Schritten (empfohlene Anwendungsdauer 7–14 Tage).

**Tagsüber:** Tag-Wirkstoffpunkt & Druckschutzpflaster

**Schritt 1:** Morgens entfernen Sie einen Tag-Wirkstoffpunkt vom Trägerpapier und kleben diesen direkt auf die Dornwarze. Wir empfehlen das Aufkleben nach dem Duschen oder einem warmen Fussbad.

**Schritt 2:** Entfernen Sie ein Druckschutzpflaster vom Trägerpapier und fixieren damit den Wirkstoffpunkt auf der betroffenen Stelle. Fest andrücken, damit das Pflaster sicher haftet.

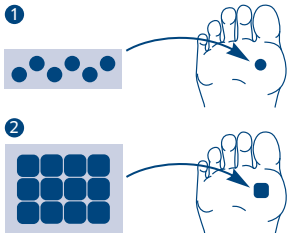

#### Nachts: Nacht-Wirkstoffpunkt

Entfernen Sie vor dem Schlafengehen das Druckschutzpflaster und den Tag-Wirkstoffpunkt. Kleben Sie einen atmungsaktiven Nacht-Wirkstoffpunkt auf die Warze. Heben Sie dafür den Wirkstoffpunkt mithilfe der Aufbring-Hilfe vom transparenten Träger ab, sodass Sie nicht in direkten Kontakt mit dem Wirkstoffpunkt kommen. Kleben Sie den Wirkstoffpunkt auf die Dornwarze auf. Ziehen Sie die Aufbring-Hilfe ab und drücken Sie den Wirkstoffpunkt vorsichtig

#### Hinweise:

- Nur zur Anwendung auf Dornwarzen.
- Nur zur äusserlichen Anwendung.
- Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden.
- Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen.
- Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen.



- In der Originalverpackung an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

- Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Enthält 35 % Salicylsäure und 2,1 % Milchsäure.
- Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 7–14 Tage. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann der Behandlungszyklus wiederholt werden. Die maximale Anwendungsdauer sollte 12 Wochen nicht überschreiten.
- Bitte informieren Sie den Schweizer Bevollmächtigten oder die zuständige Behörde (Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut; [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)), wenn mit dem Medizinprodukt schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten sollten.

#### Inhalt:

2×12 Wirkstoffpunkte, 12 Druckschutzpflaster

#### Zusammensetzung:

Salicylsäure 35 %, Milchsäure 2,1 %

#### Überarbeitung:

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Februar 2022 überarbeitet.

#### Hersteller:

EuroSirel S.P.A. Viale Europa, 30 20047 Cusago (MI), Italy

#### Schweizer Bevollmächtigter:

CH REP Device & Care Sagl, Via Mulino 3, CH-6855 Stabio

#### Importeur:



Merz Pharma (Schweiz) AG  
Hegenheimermattweg 57  
CH-4123 Allschwil



tetesept  
[www.tetesept.ch](http://www.tetesept.ch)

## Pansement intensif pour verrues plantaires

### Dispositif médical

**Doses autocollantes de principe actif aux acides salicylique et lactique, et pansement protecteur pour atténuer la douleur provoquée par les verrues plantaires et pour les traiter localement.**

Ce concept de jour et de nuit permet d'éliminer efficacement la verrue et de protéger la peau voisine. Les doses de principe actif retirent efficacement et de manière ciblée la verrue plantaire grâce à l'effet exfoliant des acides salicylique et lactique. Les pansements protecteurs atténuent la douleur compressive, ils protègent contre une propagation d'infection et offrent un maintien sûr.


#### Utilisation:

Le traitement a lieu en 2 étapes (durée d'utilisation recommandée 7 à 14 jours).

**Le jour:** dose ponctuelle diurne de substance active et pansement protecteur

**Etape 1:** le matin, détachez du papier support une dose diurne de substance active et collez la directement sur la verrue plantaire. Nous recommandons de la coller après la douche ou un bain de pieds chaud.


**Etape 2:** détachez du papier support un pansement protecteur pour immobiliser ainsi la dose de substance active sur la zone concernée. Appuyez fermement afin que le pansement adhère bien.

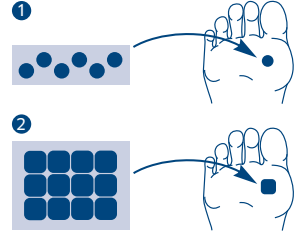


#### La nuit: dose ponctuelle nocturne de substance active

Avant de vous coucher, retirez le pansement protecteur et la dose ponctuelle diurne de substance active. Ensuite, collez une dose ponctuelle nocturne respirante de substance active sur la verrue. A l'aide du moyen d'application, détachez la dose ponctuelle de substance active du support transparent afin que vous ne puissiez pas toucher directement la dose ponctuelle. Collez la dose ponctuelle de substance active sur la verrue

plantaire. Détachez le moyen d'application puis appuyez fermement et prudemment sur l'emplacement de la verrue. Ensuite, retirez la pellicule bleue de la dose ponctuelle.

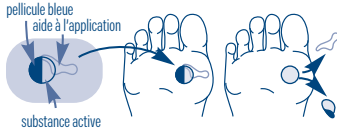

#### Remarques:

- A utiliser uniquement sur les verrues plantaires.
- Utilisation externe uniquement.
- Ne pas utiliser sur une peau blessée ou qui présente des rougeurs.
- Arrêter tout de suite en cas d'irritations cutanées.
- Les diabétiques, les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 16 ans doivent consulter un médecin avant utilisation.
-  Ranger dans la boîte d'origine dans un endroit propre, frais et sec.
- Garder hors de portée des enfants.
- Contient 35 % d'acide salicylique et 2,1 % d'acide lactique.
- La durée d'utilisation recommandée est de 7 à 14 jours. Si la verrue n'a pas été complètement enlevée, il est possible de répéter le cycle de traitement. La durée maximale de traitement ne doit pas dépasser 12 semaines.
- Veuillez informer le mandataire suisse ou l'autorité compétente (Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques; [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)) si des effets secondaires graves devaient apparaître pendant l'usage du dispositif médical.

#### Contenu:

2x12 doses ponctuelles de substance active + 12 pansements protecteurs

#### Composition:

Acide salicylique 35 %, acide lactique 2,1 %

#### Révision:

Ce mode d'emploi a été révisé pour la dernière fois en février 2022.


#### Fabricant:

 Eurosil S.P.A. Viale Europa, 30 20047 Cusago (MI), Italy

#### Mandataire suisse:

 Device & Care Sagi, Via Mulino 3, CH-6855 Stabio

#### Importateur:

 Merz Pharma (Schweiz) AG  
Hegenheimermattweg 57  
CH-4123 Allschwil



**tetesept**  
[www.tetesept.ch](http://www.tetesept.ch)



# tetesept:

## Cerotto intensivo per verruche plantari

### Dispositivo medico

### Punti con sostanza attiva autoadesivi con acido salicilico e acido lattico e cerotti di protezione dalla pressione per il sollievo dal dolore e il trattamento locale delle verruche plantari.

Il concetto giorno e notte rimuove efficacemente la verruca plantare e protegge la pelle circostante. I punti con sostanza attiva rimuovono la verruca plantare in modo efficace e mirato attraverso l'effetto peeling dell'acido salicilico e dell'acido lattico. I cerotti di protezione dalla pressione alleviano il dolore da pressione, proteggono dalla diffusione dell'infezione e forniscono una presa sicura.


#### Utilizzo:

Il trattamento avviene in 2 fasi (durata consigliata del trattamento 7-14 giorni).

**Di giorno:** punto con sostanza attiva per il giorno e cerotto di protezione contro la pressione

**Fase 1:** al mattino rimuovere un punto con sostanza attiva per il giorno dalla carta di supporto e applicarlo direttamente sulla verruca plantare. Consigliamo di applicarlo dopo una doccia o un pediluvio caldo.


**Fase 2:** rimuovere un cerotto di protezione dalla pressione dalla carta di supporto e usarlo per fissare il punto con sostanza attiva sulla zona interessata. Premere saldamente in modo che il cerotto aderisca bene.

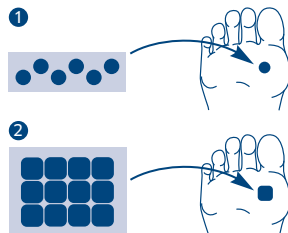


#### Di notte: punto con sostanza attiva per la notte

Rimuovere il cerotto di protezione dalla pressione e il punto con sostanza attiva per il giorno prima di andare a dormire. Applicare un punto con sostanza attiva per la notte traspirante sulla verruca. A tal fine, sollevare il punto con sostanza attiva dal supporto trasparente utilizzando l'aiutolo per l'applicazione in modo da non entrare in contatto diretto con il punto con sostanza attiva. Applicare il punto

con sostanza attiva sulla verruca plantare. Staccare l'aiutolo per l'applicazione e premere saldamente con cautela il punto con sostanza attiva. Successivamente, rimuovere la pellicola blu dal punto con sostanza attiva.

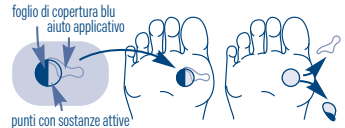

#### Avvertenze:

- Solo per applicazione su verruche plantari.
- Solo per uso esterno.
- Non applicare sulle ferite o sulla pelle arrossata.
- In caso di irritazione cutanea interrompere immediatamente l'utilizzo.
- In caso di diabete, problemi circolatori, gravidanza, allattamento e per bambini di età inferiore ai 16 anni è opportuno chiedere un consulto medico prima dell'utilizzo.
-  Conservare nella confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Contiene il 35 % di acido salicilico e il 2,1 % di acido lattico.
- La durata consigliata del trattamento è 7-14 giorni. Se la verruca non è stata rimossa completamente, è possibile ripetere il ciclo di trattamento. La durata massima del trattamento non deve superare le 12 settimane.
- Si prega di informare il produttore o l'autorità competente (Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)) se dovessero verificarsi gravi effetti collaterali durante l'utilizzo del dispositivo medico.

#### Contenuto:

2x12 punti con sostanze attive + 12 cerotti di protezione dalla pressione

#### Composizione:

35 % di acido salicilico, 2,1 % di acido lattico


#### Revisione:

Le presenti istruzioni d'uso sono state rielaborate l'ultima volta nel mese di febbraio 2022.


#### Fabricante:

 Eurosil S.P.A. Viale Europa, 30 20047 Cusago (MI), Italy

#### Mandatario Svizzero:

 Device & Care Sagi, Via Mulino 3, CH-6855 Stabio

#### Importatore:

 Merz Pharma (Schweiz) AG  
Hegenheimermattweg 57  
CH-4123 Allschwil



**tetesept**  
[www.tetesept.ch](http://www.tetesept.ch)

